




ALLIANCE
BIO EXPERTISE

Connected Microbiology

PRÉPARATION DE MILIEUX MEDIWEL® & DISTRIWEL®

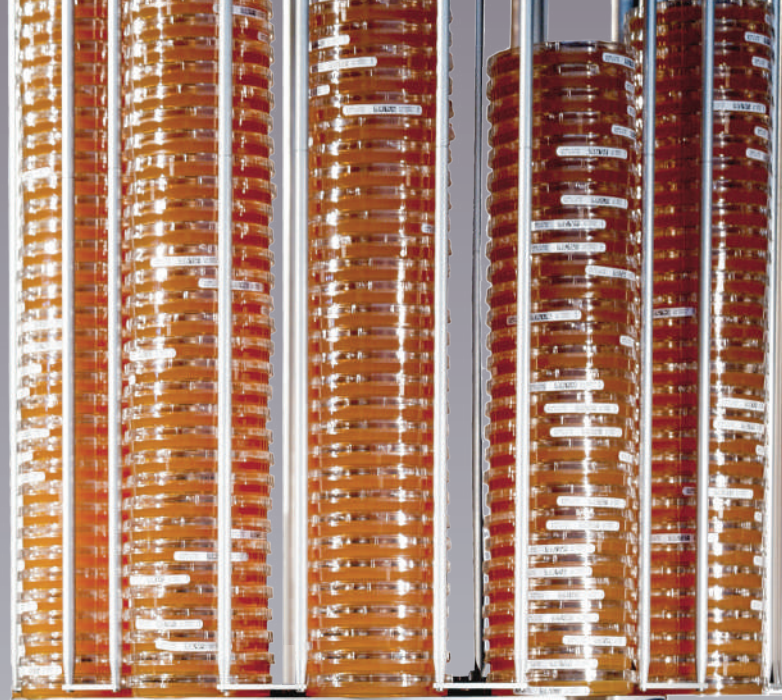

ALLIANCE
BIO EXPERTISE

DISTRIWEL 440

ESV-LABO

Microflex 1.5

ALLIANCE
BIO EXPERTISE





DISTRIWEL 440[®]

DISTRIWEL 440[®]

Augmentez votre
productivité
qualité
traçabilité

PERFORMANCES



440 boîtes
remplies en 30min

Dispositif autonome

Jusqu'à 440 boîtes de Pétri
en 30 min



0°



Niveau à bulle intégré,
garantissant un milieu
horizontal de qualité

Écran tactile LCD 7"
Affichage intuitif

Imprimez jusqu'à 15 caractères
(2 lignes) sur la boîte de Pétri
(imprimante jet d'encre optionnelle)



L'effet de refroidissement Peltier réduit
la condensation et le temps de solidification

Prévention de l'aérobiocontamination

Prévention de la contamination lors de
la distribution : lampe UV et couvercle
de protection en plexiglas

Ajout de sang
en option

Alarmes visuelles
multicolores



Votre milieu de culture est distribué
avec précision par une pompe
péristaltique Masterflex™


CONNECTED
MICROBIOLOGY





SPECIFICATIONS

DISTRIWEL®

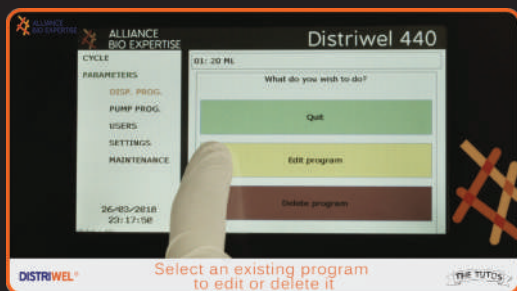

Mettez en place un programme facilement avec nos Tutos




Distriwel - How to set a program



Pour ne rien louper de nos vidéos abonnez-vous à notre chaîne Youtube :

ALLIANCE BIO EXPERTISE 

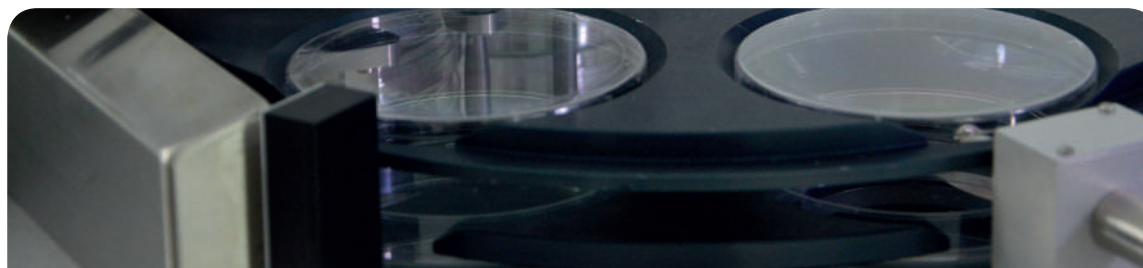

CARACTÉRISTIQUES DU DISTRIWEL

Boîtes de Pétri 90mm par heure	Jusqu'à 880
Capacité du carrousel	440 boîtes de Pétri
Refroidissement	Effet Peltier intégré
Prévention de la contamination	Lampe UV intégrée
Fonction distribution des boîtes	✓
Précision du versement	±1%
Volume à distribuer	00,1 ml – 99 ml - 00,1ml - 999,9 ml (mode pompe)
Fonction stockage des boîtes	✓
Pompe péristaltique	Pompe Masterflex® intégrée
Nombre de programmes	40
Ecran de contrôle	Écran tactile LCD
Pays d'origine	100% France
Traçabilité (option)	Impression sur boîte de Pétri (LINX8900)
Pédalier (pour distribution manuelle)	✓ (option)

DIMENSIONS & ALIMENTATION

I x H x L	808 x 940 x 689 mm
Alimentation électrique	100 – 240v - 50-60 Hz – 10A
Puissance max.	150 W

Emballer vos milieux prêts à l'emploi !



Commandez-le avec votre DISTRIWEL 440 : Ref : MINIMA