



OHAUS Value in a Full-Featured, Portable Printer

The SF40A combines high performance and multiple functions to offer OHAUS quality and durability in a portable printer. The SF40A offers advanced functionality in an easy-to-use and set up printer at an exceptional value. This versatile printer is ideal for use in conjunction with OHAUS balances and scales in laboratory, industrial, and educational applications to ensure accurate documentation of weighing results.

Unique Features:

- The statistics and totalization modes and real time clock complement OHAUS weighing instruments' application modes and offer functionality that assists the reporting processes.
- SF40A helps support the efficiency of the weighing and recording processes. RS232 interface and PC configuration software make setting up and using the printer fast and simple.
- With the ability to print in 13 different languages, SF40A can print in the language of the connected device to support universal operation.

SF40A *Impact Printer*

Model	SF40A
Number of Columns	40 columns
Print Speed	Approximately 1.2 lines per second
Application Modes	Totalization, Statistics (Statistics printout includes number of samples, average value, standard deviation, minimum, maximum, min-max differential, and total sample weight sum)
Paper Roll (W x Dia.)	Standard paper 2.26 in. x Ø 2.36 in. max / 57.5 mm x Ø 60 mm max.
Power Requirements	AC adapter Input: 100 – 240 VAC, 50 - 60 Hz AC adapter output: 12 VDC, 2.5 A
Interface	RS232C
Ambient Temperature	0 °C – 40 °C
Printer Dimensions (W x L x H)	140 x 205 x 75 mm
Net Weight	740 g (Paper roll included)
Shipping Weight	0.8 kg

Other Standard Features


Status indicator, 40 characters per line, perform zero and tare operations directly from the printer. Full functionality with Discovery, Adventurer™ Pro, Explorer®, Navigator®, MB Series Moisture Analyzers and 'T' Series indicators. Statistics and Totalization not supported on CKW Bench Scale and Scout® Pro Series.

Multi-Language Printing: English, Spanish, German, Italian, French, Chinese, Korean, Japanese, Russian, Polish, Portuguese, Hungarian and Czech.

Accessories

Paper (Included)	12120799
Paper Rotary Axis (Included)	30063920
Ink Ribbon (Included)	30529322
Printer Cable RS9 M/F (Included)	30529323
Cable Adapter (Included)	30059316
Printer Cable RS9 F/Bare Wire	80500552
Power Cable AU, SF40A (Not Included)	12120313

Outline Dimensions

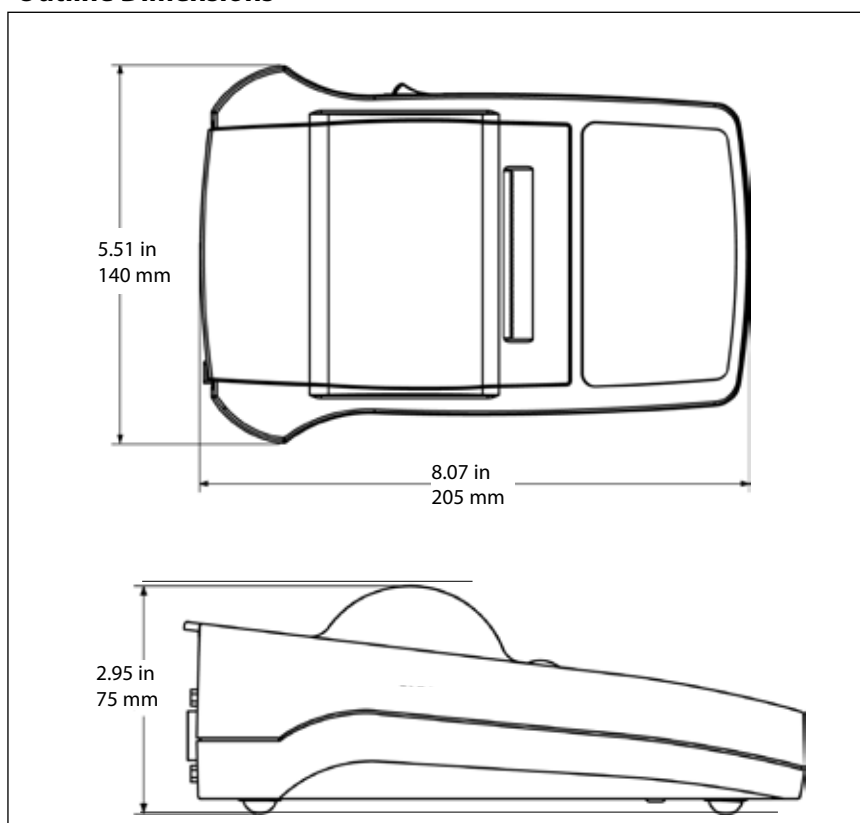

OHAUS Europe GmbH

Heuwinkelstrasse 3,
8606 Nänikon,
Switzerland

e-mail: ssc@ohaus.com
Tel: 0041 22 567 53 19
e-mail: tsc@ohaus.com
Tel: 0041 22 567 53 20

www.ohaus.com

The management system governing the manufacture of this product is ISO 9001:2015 certified.





Les performances OHAUS dans une imprimante portable complète.

L'imprimante portable SF40A réunit hautes performances et fonctions multiples en accord avec les principes de qualité et de durabilité d'OHAUS. Simple à configurer et à utiliser et vendue à un prix modique, elle est assortie de fonctionnalités avancées. Polyvalente, elle va complètement de pair avec les balances OHAUS pour les applications en laboratoire, industrielles et d'enseignement, pour la consignation rigoureuse des résultats de pesage.

Caractéristiques standard :

- Aux modes d'application des instruments de pesage OHAUS s'ajoutent les modes de statistiques et de totalisation et une horloge en temps réel, autant d'outils qui facilitent la génération de rapports.
- Avec l'imprimante SF40A, vos pesages et enregistrements seront valorisés. Celle-ci se configure et s'utilise facilement et rapidement par le biais de l'interface RS232 et du logiciel de configuration pour PC.
- Avec 13 langues d'impression, il est possible d'imprimer les données dans la langue du périphérique connecté pour une cohérence universelle.

SF40A Imprimante à Impact

Modèle	SF40A
Nombre de colonnes	40 colonnes
Vitesse d'impression	Environ 1,2 lignes par seconde
Application	Impression à impact, statistiques, totalisation
Rouleau de papier (L x dia.)	Papier standard 57,5 mm x Ø 60 mm maxi / 2,26 pouces x Ø 2,36 pouces maxi
Alimentation requise	Entrée d'adaptateur secteur : 100-240 V c.a., 50-60 Hz Sortie d'adaptateur secteur : 12 V c.c., 2,5 A
Interface	RS232C
Température ambiante	0 °C - 40 °C
Dimensions de l'imprimante (l x L x H)	140 x 205 x 75 mm
Poids net	740 g (rouleau de papier compris)
Poids à l'expédition	0.8 kg


Autres caractéristiques standard

Indicateur d'état, 40 caractères par ligne, permet d'effectuer des opérations de remise à zéro et de tare directement depuis l'imprimante
Impression multilingue : anglais, espagnol, allemand, italien, français, chinois, coréen, japonais, russe, polonais, portugais, hongrois et tchèque.

Pièces détachées et accessoires

Rouleaux papier (2 pièces)	12120799
Axe de rotation papier	30063920
Cassette ruban encreur	30529322
Câble RS9 M/F (inclus)	30529323
Câble Adaptateur RS9 F/M (inclus)	30059316
SF40A Câble RS9 F/Bare Wire	80500552
Câble d'alimentation AU MB	12120313

Dimensions extérieures

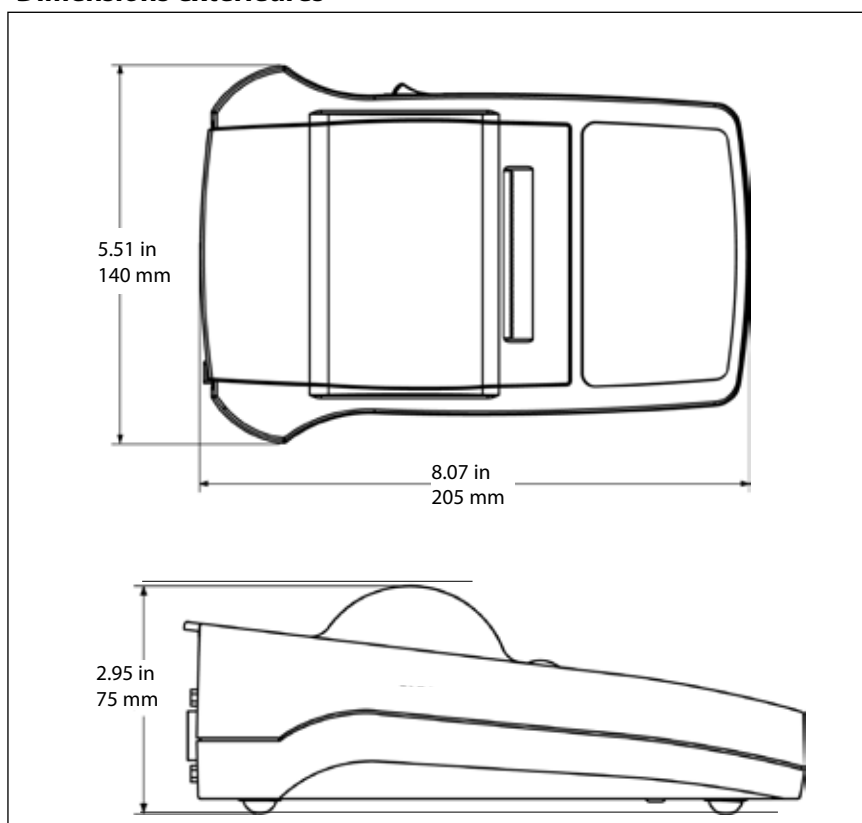

OHAUS Europe GmbH

Heuwinkelstrasse 3,
8606 Nänikon,
Suisse

e-mail: ssc@ohaus.com

Tel: 0041 22 567 53 19

e-mail: tsc@ohaus.com

Tel: 0041 22 567 53 20

www.ohaus.com

Le système de gestion
régissant la fabrication de
ce produit est certifié ISO
9001:2015.

